



AIRFLOW
PROPHYLAXIS
MASTER



AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER

- Гарантированная швейцарская точность
- Превосходный дизайн и эргономика
- При поддержке и непосредственном участии ведущих мировых специалистов в области стоматологии
- 100 000 часов технических и клинических тестов



AIR-FLOW 2
1982-1990



AIR-FLOW S2
1985-2018



AIR-FLOW Master
Piezon
2008



35 лет инноваций
4 поколение

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER



- Новое поколение камеры для порошка
- Изготовлена из ударопрочного и химически стойкого материала полимерного материала
- Большая вместимость и эргономика
- 360° магнитный держатель
- Полностью разбирается для сухой очистки
- Динамически сбалансирована для оптимальной подачи и уменьшения расхода порошка

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER

40 rp. AIR-FLOW PLUS



90 rp. AIR-FLOW Classic



AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER



- Новая ультрасовременная система нагнетания и сброса давления
- Наддув и разгерметизация камеры порошка в течение нескольких секунд
- Интегрированный магнитный держатель
- Подсветка камеры для порошка при рабочем давлении

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER




Новая система подключения шлангов
"plug-and-play" (подключи и работай)

- Новый более прочный и эффективный шланг
- Быстрое и легкое подсоединение
- Интегрированный регулятор воды (max 90 ml/min)

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER

Новое поколение
ультразвукового модуля
PIEZON NO PAIN:

- Динамическая коррекция коэффициента мощности, адаптирующая выходную мощность согласно нагрузке, приложенной к рабочему инструменту
- Нет отложений зубного камня = низкий уровень мощности
- Высокое сопротивление, вызванное наличием зубного камня = повышение мощности в рамках минимальной инвазивности.

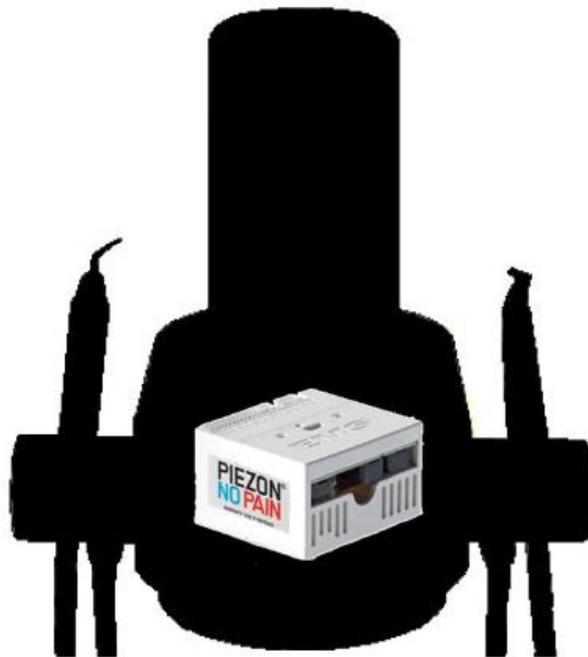


PIEZON NO PAIN
2-го поколения

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER

Новая емкость для жидкости
PIEZON

- Кристально прозрачная
- Объем 800 мл.
- 360° соединение
- Широкое и удобное отверстие для заполнения
- Возможно использовать различные растворы
- Ударопрочная

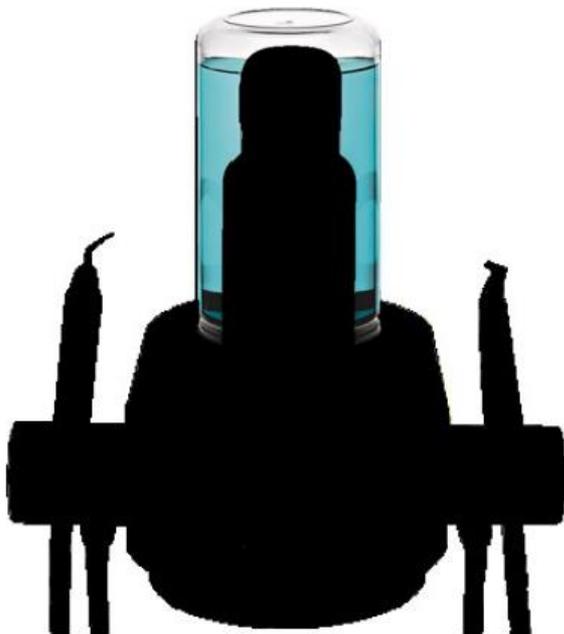

Раствор

Натрий гипохлорит
Хлоргексидин
Карбанилиды
Повидон-йод
Четвертичное соединение аммония
Цетилпиридиния хлорид
Лимонная кислота
Физиологический раствор (NaCl %)
Этиловый спирт
Изопропанол

Концентрация

До 5%
До 1%
До 0,05%
До 12%
До 0,7%
До 1%
До 5%
До 0,9%
До 5%
До 5%

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER



Характеристики

- Интерактивная сенсорная панель
- СИСТЕМА ПОДОГРЕВА – система с регулировкой температуры воды для обеспечения комфорта во время процедур
- Звуковая индикация
- Напоминание о техническом обслуживании
- Беспроводная педаль из нержавеющей стали с функцией BOOST (увеличения мощности)
- Легкая установка (монтаж)

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER



Интерактивная сенсорная панель

- Простая и эргономичная
- 10 световых индикаторов
- Гладкая поверхность для легкой очистки
- Регулирует уровень мощности ультразвука PIEZON и уровень рабочего давления AIRFLOW
- Регулирует уровень звукового оповещения
- Напоминает о необходимости технического обслуживания

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER

РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ

- Регулирует уровень мощности ультразвука PIEZON и уровень рабочего давления AIRFLOW



PIEZON мощность

Регулировки мощности	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мощность (W)	0	0,4	1,2	2,1	3,0	3,9	4,8	5,6	6,4	7,2	8,0

AIRFLOW давление

Регулировки давления	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Статическое (Bar)	/	2,5	2,7	3,0	3,2	3,5	3,7	4,0	4,2	4,5	4,7
CLASSIC (динамическое)	/	1,9	2,1	2,3	2,6	2,8	3,0	3,2	3,5	3,7	3,9
PLUS (динамическое)	/	1,5	1,7	1,9	2	2,2	2,4	2,6	2,7	2,9	3,1

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER



- Одновременно нажмите и удерживайте «0» и «10» для регулировки уровня подогрева воды и громкости звукового оповещения

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER



Температура воды

0	1	2	3	4
Без нагрева	25°	30°	35°	40°

Громкость звукового сигнала

6	7	8	9	10
без звука	низкий уровень звука	средний уровень звука	высокий уровень звука	максимальный уровень звука

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER

Напоминания об обслуживании и устранении неисправностей



1

Автоматическое напоминание о ежегодном техническом обслуживании

1

Обнаружены постоянные или временные сбои в работе аппарата

2

Батареи беспроводной педали разряжены

3

Беспроводная педаль не подключена

3

Оба шнура (AIRFLOW и PIEZON) не подключены

4

Перегрев аппарата

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER



- Одновременно нажмите и удерживайте «0», «5» и «10» для подключения беспроводной педали




AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER

PIEZON усиление мощности (Boost)

Регулировки мощности	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уровень усиления (Boost)	0	6	7	8	8	8	9	10	10	10	10

AIRFLOW усиление мощности (Boost)

Регулировки мощности	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уровень усиления (Boost)	0	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10

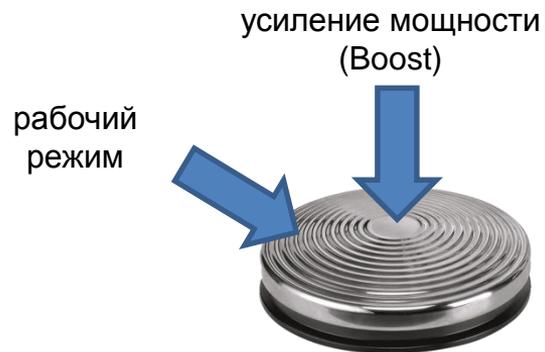

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER



Решение для гигиены и очистки



СИСТЕМА ПРОЧИСТКИ (PURGE)
– полностью интегрированная система автоматической прочистки линии подачи воды в системах Airflow® и Piezon®. В течение минуты производит очистку от остатков использованного раствора:

- 100% автоматизированная процедура очистки
- Специальная емкость для ночной очистки
- Специальная ночная чистящая жидкость для длительного дезинфекционного раствора (800 мл на 1 месяц)
- Очищает системы подачи воды обеих линий (PIEZON и AIRFLOW)




AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER



- Внешний воздушный и водяной фильтр
- Простой контроль состояния фильтров
- Легкая замена фильтров



AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER

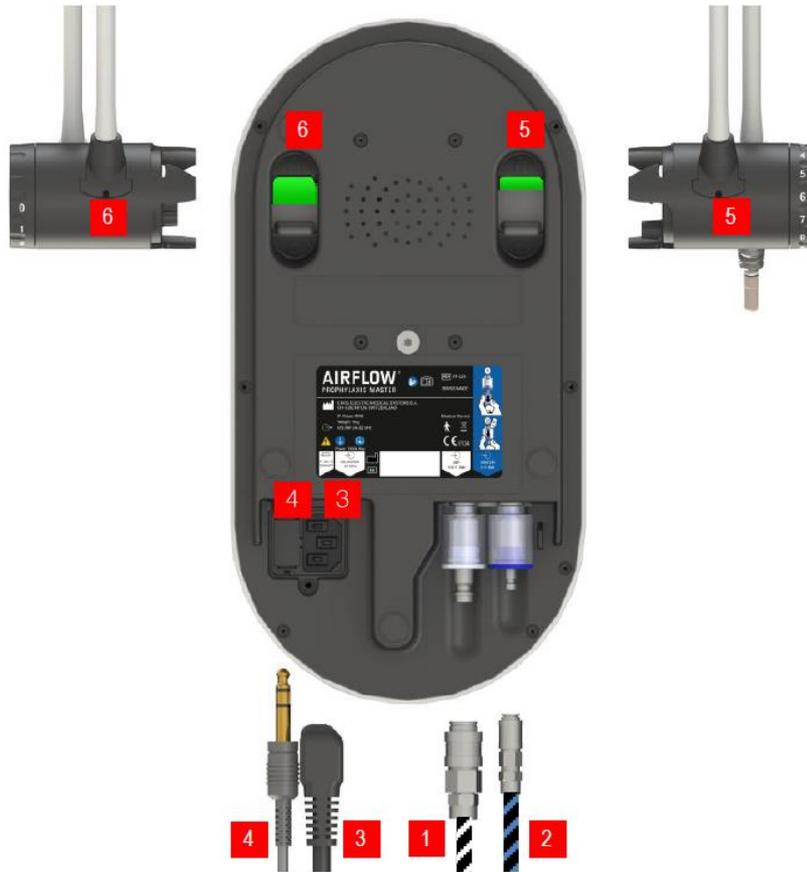

EH-142

- 1 Воздушный шланг - фильтр уже установлен

НАЖМИТЕ С УСИЛИЕМ

EG-110

- 2 Водный шланг - фильтр уже установлен

- 3 Шнур питания в розетке
(патрон предохранителя в розетке)

EK-410

- 4 Педаль с кабельным подключением
ТОЛЬКО ЕСЛИ ПРИМЕНИМО

EM-145

- 5 Шнур насадки AIRFLOW® + привод замка

НАЖМИТЕ С УСИЛИЕМ

EM-146

- 6 Шнур насадки PIEZON® + привод замка

НАЖМИТЕ С УСИЛИЕМ

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER



AIRFLOW® STATION

AIRFLOW® STATION+

- Эффективное использование пространства благодаря функции 360°-вращения, идеальна для использования в небольших помещениях
- AIRFLOW® STATION+ имеет автономную систему подачи воды
- Нет необходимости подключения к сети водоснабжения

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER



Легкое
подключение

Беспроводная
педаль

Подогрев
воды

Усиление
мощности

Комфорт

Опция
автономной
подачи воды

Магнитный
держатель
емкости

Магнитный
держатель
емкости

Новая динамически
сбалансированная
подача порошка

**Клинический
эффект**

PIEZON
NO PAIN

Для большего числа
клинических случаев GBT



Низкие
эксплуатационные
расходы

Экономичность

На 30% меньше
расход PLUS

На 16% меньше
расход COMFORT

Внешние
фильтры

Гладкая
поверхность

**Гигиена и
безопасность**

Дезинфекция
линий подачи
воды

Ночная
очистка

AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER



X 12



X 2



AIRFLOW® PROPHYLAXIS MASTER

