

**PALA®**

**Карта фасонов**



**S.T.I.**  
DENT®

**Pala® Premium® 6 и Pala® Premium® 8**

Giving a hand to oral health.



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

# С Pala Premium вы получаете свободу в комбинации эстетики и функциональности так, как Вам нужно

**PALA®**

Pala Premium – проверенные акриловые зубы, которые отвечают всем технологическим требованиям современной стоматологии. Это первая линия акриловых зубов со структурой NanoPearls, гарантирующей высочайшую устойчивость на истирание. Широкий диапазон фасонов и размеров обеспечивает гибкость при подборе зубов для протеза.

Сочетание технологии CAD/CAM и INCOMP процесса изготовления обеспечивает точность формы и функциональности. Вы всегда получаете надежные, достоверные оттенки во всех партиях зубов Premium, а значит лучшую адаптацию к облицовкам и остаточным зубным рядам.

Показания для фронтальных		Показания для боковых	
<b>Premium 6</b>	полные съемные протезы	<b>Premium 8</b>	полные съемные протезы
	протезы на имплантатах		протезы на имплантатах
	частичные съемные протезы		частичные съемные протезы

## Premium Факты


1. Акриловая структура с наполнителем NanoPearls® для высокой устойчивости и живой опалесценции.
2. Зубы можно применять в любой концепции постановки, как с нормальным соотношением челюстей, так и с дисфункцией, обеспечивая большую гибкость в работе техника.
3. Настоящие природные формы, идентичные натуральным зубам.
4. Неотличимы от остаточного зубного ряда
5. Расширенное основание и увеличенный объем для улучшения контуров сосочков.



Мультифункциональна постановка Pala Premium 8 в различных соотношениях верхней и нижней челюстей в следующих вариантах окклюзии:


- A. Зуб к зубу
- B. Зуб к двум зубам
- C. Комбинированная

## Premium 6 фронтальные

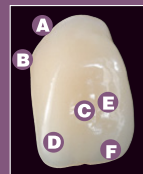

- A. Вариативная область шейки
- B. Широкое основание зуба
- C. Натуральная лабиальная поверхность
- D. Слои копируют натуральный зуб
- E. 3D-Мультислойность
- F. Естественные контуры лабиальной поверхности

## Premium 8 боковые

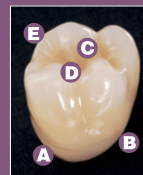

- A. Вариативная область шейки
- B. Широкое основание зуба
- C. Окклюзионный дизайн позволяет лингвальную и сбалансированную постановку окклюзии
- D. Ширина окклюзионной поверхности идентична натуральным зубам
- E. Запас эмали для точечной пришлифовки жевательной поверхности


# Инновационные технологии для долговечности зубов

**PALA®**

Высокое качество наших акриловых зубов Pala Premium основано на передовых методах производства и использовании особо высококачественных материалов. Акриловые зубы линии Premium разработаны и произведены компанией **Kulzer** в Германии: каждый из этих зубов, используемых во всем мире, поступает с завода, расположенного в городе Вассербург, недалеко от озера Констанц.

- Патентованный материал NanoPearls (Нано Перлы) включает уникальные гибридные наполнители в комбинации с жестко-эластичной матрицей.
- Результат: высокая абразивная устойчивость, натуральная опалесценция и качество поверхности, в сочетании высокой прочностью на излом и долговечностью.
- 100 % стабильности цвета в течение долгого времени.

## NanoPearls® – высокая прочность на излом и устойчивость к стираемости

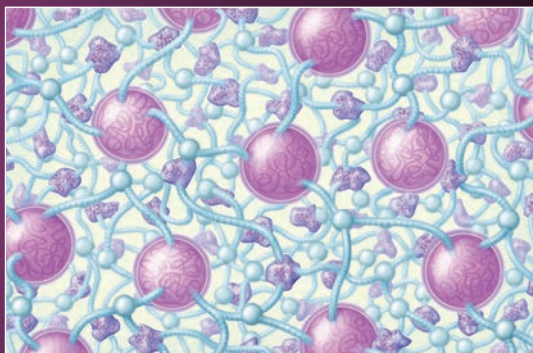

Органический наполнитель с зоной диффузии в матрицу




Модифицированные силаном нанопополнители в жестко-эластичной матрице








Плотно сшитая жестко-эластичная матрица












Сравнение износа материалов для искусственных зубов:  
Объемный тест износа, основанный на АСТА-методе, Амстердам, Голландия

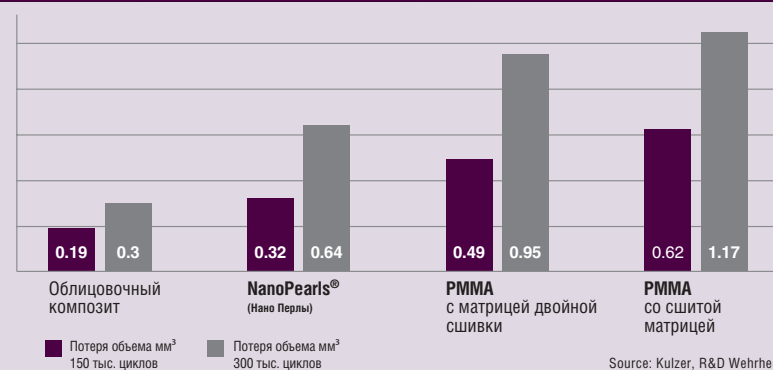





# Premium 6 фронтальные

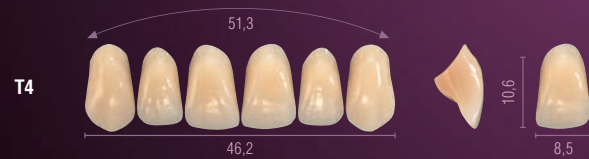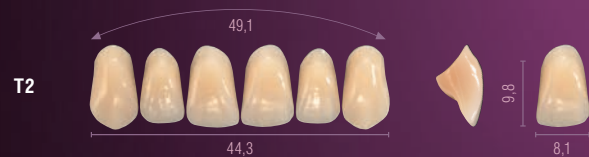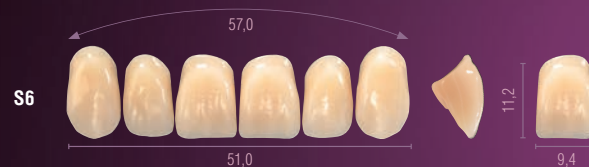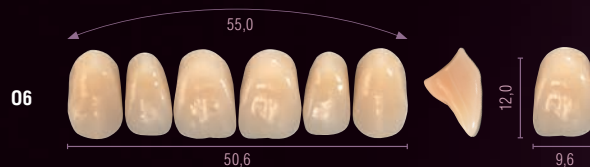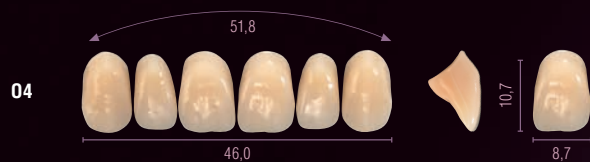

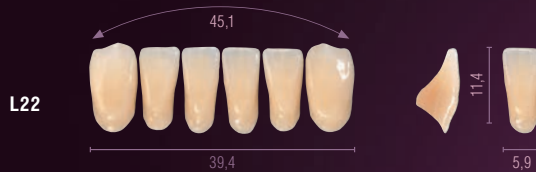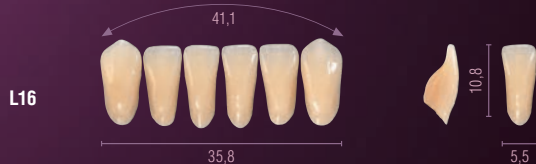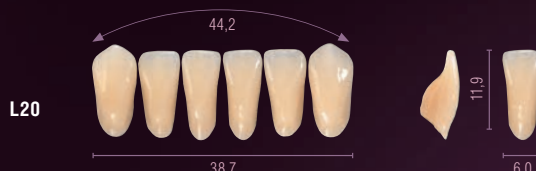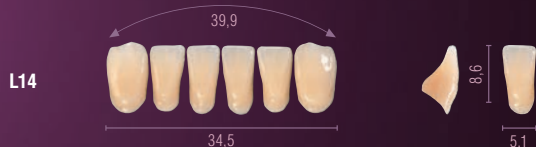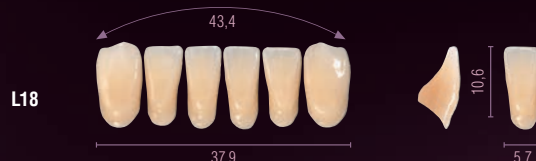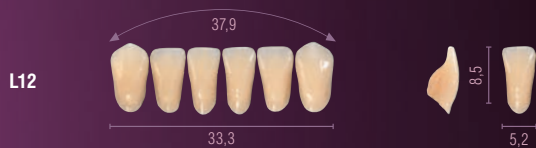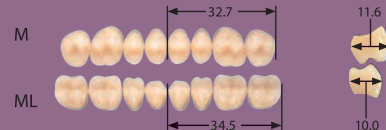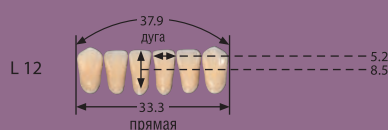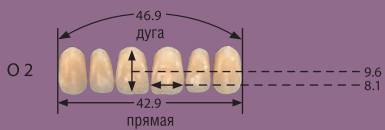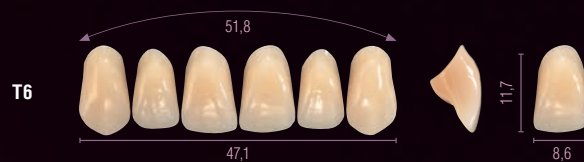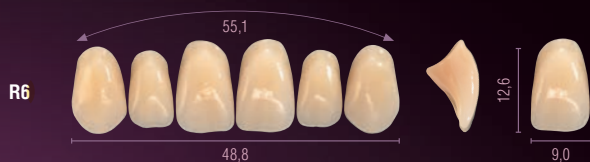

# Premium 6 фронтальные

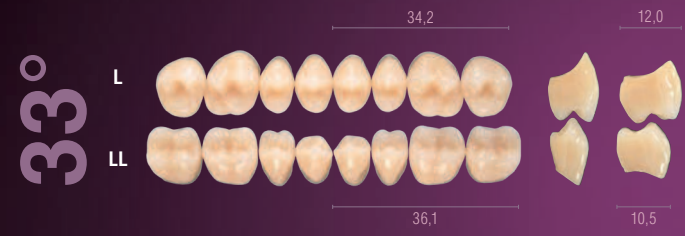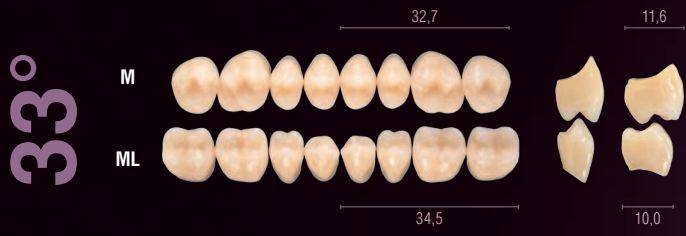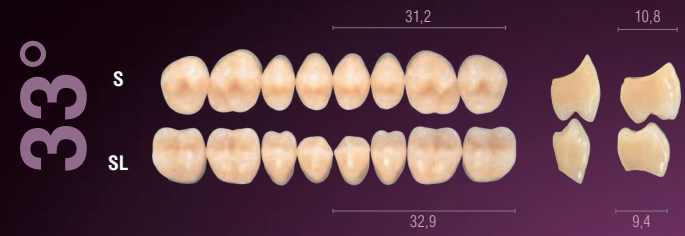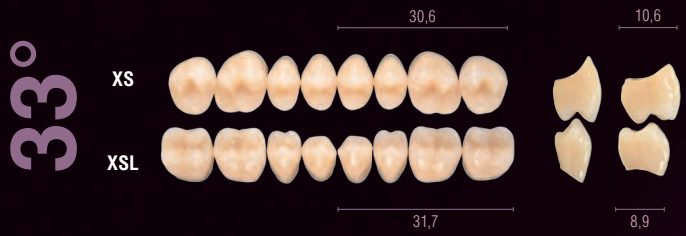

# Premium 8 боковые



## Premium – таблица соответствия зубов в гарнитурах

		Premium 6 верхние	Premium 6 верхние	Premium 8 верх/низ
				
Овальные		O2 O4 O6	L12, L14 L16, L18 L20, L22	XS/XSL+S/SL S/SL + M/ML L/LL
Прямоугольные		R2 R4 R6	L12 L14, L16 L18	XS/XSL+S/SL S/SL + M/ML M/ML + L/LL
Квадратные		S2 S4 S6	L14, L16 L18, L20, L22	XS/XSL+S/SL M/ML L/LL
Треугольные		T2 T4 T6	L14 L16 L18	XS/XSL+S/SL S/SL + M/ML L/LL

# Pala Mix & Match



# Pala Premium



## **Высокие технологии:**

всегда неизменное, абсолютное высокое качество

Компьютеризованная разработка и производство (CAD/CAM) для высочайшей прецизионности. Результат: гарантированно идентичные пары зубов, а также аутентичные функции и размеры.

## **Патент:**

не имеющий аналогов материал наполнителя - NanoPearls®

Запатентованный филлер NanoPearls состоит из уникального микро наполнителя в комбинации с вязко-упругим нано-наполнителем. Результат: высочайшая устойчивость к истиранию и прочность на излом для значительно большего срока службы.

## **Характеристики:**

нет пузырьков, нет пор – надежность

Производственный метод INCOMP создает экстремально плотные акриловые зубы без пор и пузырьков. Результат: постоянное надежное качество в каждом зубе.

## **Долговечность:**

исследования доказали устойчивость на абразию

Независимые исследования университетов Heidelberg и Charite Medical Centre в Берлине показали, что устойчивость на истирание материала зубов Premium на 50 % выше, чем у обычных PMMA материалов. Результат: надежные, качественные и долговечные протезы с 12-ти летней гарантией производителя.

Производитель: «Кульцер ГмбХ», Германия, Лейпцигер штрассе 2, 63450, Ханау

Поставщик в России: ООО «Эс. Ти. Ай. дент», 123182, Москва, ул. Щукинская, 2, эт. 1, к.179-180, mail@stident.ru