



Memosil® 2

Транспарентный А силикон для регистрации прикуса и специальных показаний. Его прозрачность позволяет визуально контролировать размещение различных вспомогательных структур. Сквозь Memosil 2 можно проводить световую полимеризацию фиксирующих и пломбировочных материалов. Материал идеально подходит для изготовления окклюзионных шаблонов под светоотверждаемые композиты на жевательные зубы, очень удобен при пломбировании полостей, а также в изготовлении шаблонов для временных виниров и коронок на фронтальные зубы.

В ортодонтической практике Memosil 2 лучше всего использовать для изготовления переносных шаблонов конструкций из брекетов на гипсовых моделях


С Memosil 2 врач и техник получают дополнительные преимущества:

- **Визуальный контроль:**

Прозрачность Memosil® 2 способствует точному позиционированию вспомогательных структур и позволяет полимеризовать светоотверждаемые композиты и пломбировочные материалы сквозь силиконовый шаблон.

- **Больше гигиены:**

Благодаря прямому и стерильному внесению, процедура применения Memosil 2 чиста и гигиенична.

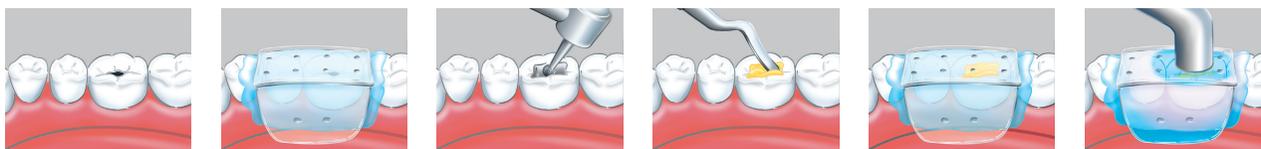

Источник: © Kulzer

В дополнение ко всему, Memosil 2 комфортен для пациентов. Благодаря короткому времени пребывания во рту и нейтральному вкусу и запаху, пациенты более расслаблены. А вы сохраняете время, т.к. материал вносится в ротовую полость напрямую.

Комплект поставки:

- 2 x 50 мл
- 12 смесительных наконечников зеленых